

**PHILIPS**

*DreamStation 2*

CPAP Advanced

Auto CPAP Advanced

# Patient

## Snabbstartsguide



# Ansluta till DreamMapper

Synkronisera din apparat med din läsplatta eller mobiltelefon med DreamMapper-appen, finns i App Store och Google Play.



1

Med apparaten och mobiltelefonen påkopplade och nära varandra ska du initiera **Bluetooth**-inställning och parkoppling i **DreamMapper**. Följ parkopplingsanvisningarna i **DreamMapper**.

2

En **6-siffrig PIN** visas på DreamStation 2-skärmen. Beroende på din telefon, måste du antingen ange **PIN** i **DreamMapper** eller peka på **"Pair"** (Koppla) på apparatens skärm inom 30 sekunder för att slutföra kopplingen.

Bluetooth

000000

Kod för kopplingsbegäran

Koppla

Avbryt




3

Skärmen visar **"Pairing to Device"** (Koppla till apparat) och sedan **"Success: Device is now paired."** (Lyckades: Apparaten är nu kopplad).

Bluetooth

Lyckades

Apparaten är nu kopplad

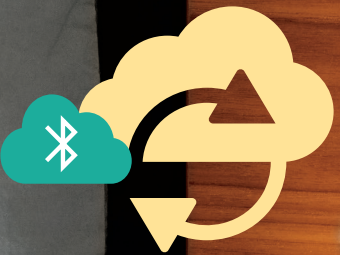

# Komma igång med behandling

Tryck på **behandlingsknappen** för att starta behandling. En **blå ring** anger att behandling pågår.

Interaktiv pekskärm

**Behandlingstryck**

En **heldragen ring** anger att ordinerat tryck tillförs. En **prickad ring** anger att Ramp Plus-tryck tillförs.

Ikön för Luftbefuktning

Behandlingsknapp



**Ikön för Ramp Plus**

**Ikön för Uppvärmd slangs temperatur**

**Obs!** Om skärmen blir svart efter 60 sekunders inaktivitet pekar du bara på den för att väcka apparaten om du vill göra fler ändringar. Detta startar även samtidigt om Ramp Plus.

## Anpassa dina inställningar

### Ramp Plus

Funktionen **Ramp Plus** ger möjlighet att ställa in ett behagligt starttryck när du vill somna.

1. Peka på ikonen **Ramp Plus** för att visa och justera ditt **Ramp Plus**-tryck.
2. Peka på **symbolerna +** eller **-** tills du uppnår en behaglig inställning. Inställningarna för **Ramp Plus** kan stängas av eller ställas in från 4 till 10 cmH<sub>2</sub>O.
3. Peka på "Confirm" (Bekräfta) för att spara inställningen.


När **Ramp Plus** är inställd sparas den och aktiveras automatiskt vid kommande behandlingssessioner utan att du behöver peka på ikonen **Ramp Plus** igen.



### Luftbefuktning (om tillgänglig)

1. Peka på ikonen för **luftbefuktning** för att visa din aktuella inställning.
2. Peka igen tills du uppnår en önskad fuktighetsnivå. Luftbefuktningen kan stängas av eller ställas in från 1 (min.) till 5 (max.).


När **luftbefuktningen** är inställd sparas den och aktiveras automatiskt vid kommande behandlingssessioner.

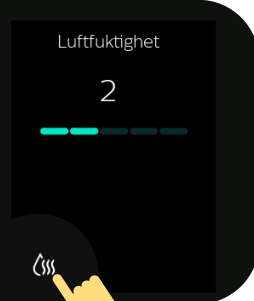

### Uppvärmd slang temperatur (om tillgänglig)

1. Peka på ikonen för **uppvärmd slang** för att visa din aktuella inställning.
2. Peka igen tills du uppnår en önskad temperatur. Värmen kan stängas av eller ställas in från 1 (min.) till 5 (max.).

När **temperaturen** är inställd sparas den och aktiveras automatiskt vid kommande behandlingssessioner.

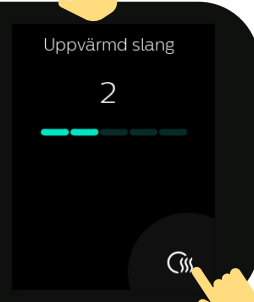


# Sammanfattning av behandlingsuppgifter

Tryck på **behandlingsknappen** för att stoppa luftflödet. En sammanfattning av dina behandlingsuppgifter visas. Åtkomst till viss information beror på vad din klinik ställt in.

## Skärmen Last Session (Senaste session)

Information i **blått** anger att du kan peka för att lära dig mer eller vidta åtgärd.

Senaste session 

Anv.timmar **0:00**

Dagar +4 timmar **0/21**

AHI **0.0**

Maskinpass. **Bra passn.**

Inställningar

1

Skärmen **Usage Hours** (Användartimmar) visar den tid som du har fått behandling i timmar och minuter under dina 3 senaste sessioner.

[< Tillbaka](#)

Anv.timmar

Nedan visas dina användningstimmar under de senaste 3 dagarna.

0:00

2 dagar  
sedan

0:00

1 dag  
sedan

0:00

Senaste  
session

2

Skärmen **AHI** visar värdet på apné-hypopné-index (AHI) under den senaste endagsperioden (om aktiverad av din klinik).

[< Tillbaka](#)

AHI

Detta är ett index som representerar antalet apnéer och hypopnéer som inträffar under en timmes sömn.

0.0

Senaste session

3

Skärmen **Mask Fit** (Maskpassning) visar hur din mask passat under din senaste session. Du kan även köra en kontroll av maskpassning. Ta på din mask och peka på **"Start"** (Starta) för att initiera kontroll av maskpassning.

[< Tillbaka](#)

Maskpassning

Du kan kontrollera maskens passning innan behandlingen startas.

Bra passn.

Senaste session

Start

# Inställningar

## Komfort, apparat och uppgifter

Åtkomst till viss information beror på vad din klinik ställt in.

1

För att justera inställningar och för att komma åt ytterligare information pekar du på "Settings" (Inställningar).

Senaste session 

Anv.timmar 0:00

Dagar +4 timmar 0/21

AHI 0.0

Maskinpass. Bra passn.

Inställningar


2

Justera tillgängliga inställningar av **Komfort** (Komfort). Information i blått anger att du kan peka för att göra ändringar.



- Tid och tryck för Ramp Plus
- Humidity (Luftfuktighet)
- Heated tube (Uppvärmad slang) (om tillgänglig)
- Slangstorlek
- FLEX



[< Tillbaka](#)

Komfort

 Ramp+ 15 Min, 4.0 

 Luftfuktighet Av 

 Uppvärmad slang Av 

 FLEX 3 



3

Svep upp för att visa ytterligare information som inställning av flygplansläge, ta bort Bluetooth-kopplingar och återställa tid eller språk.

Peka på informationen i **blått** för att göra ändringar. Du kan även visa apparatens serienummer, programversion och modemstatus.

< Tillbaka

Apparat

Flygplansläge **Av**

Bluetooth **4 Parad**

Tid **10:00 EM**

Språk **Svenska**

SN DOSIM00000010A

4

Peka på **"View Reports"** (Visa rapporter) för att välja ett datumintervall och visa ytterligare sammanfattningar av behandlingsuppgifter.

För att när som helst återgå från **Settings** (Inställningar) pekar du på **"Back"** (Tillbaka) till skärmen **Last Session screen** (Senaste session).

< Tillbaka

SN DOSIM00000010A

Prog.vara D1.0.1.3695

Modemanrop **10/30/00**

Visa rapporter

Läs din användarhandbok för detaljerad felsökningsinformation.

# Rengöring och underhåll

Du måste regelbundet rengöra din apparat och komponenterna för att de ska fungera bra. Det är även viktigt för att bibehålla din goda hälsa.


## Luftbefuktarens vattenbehållare, tätning och lock

Rengör dagligen med vatten och mildt diskmedel.



## Slangar och adaptrar


Rengör varje vecka med vatten och mildt diskmedel.

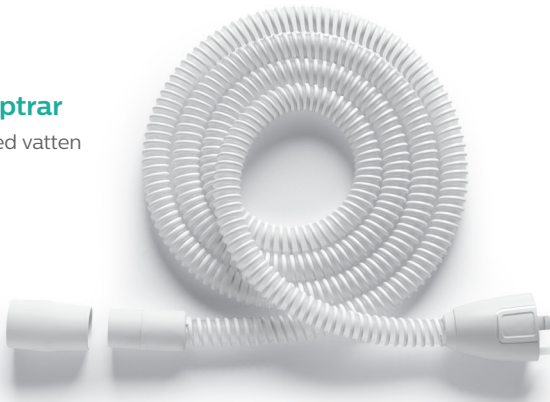

## Filter

Skölj grått, återanvändningsbart filter varannan vecka med vatten.

Skölj inte blått engångsfilter.

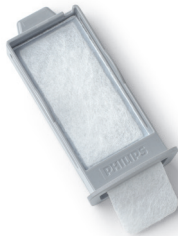

**Läs din användarhandbok för detaljerad information om skötsel och rengöring.**



© 2021 Koninklijke Philips N.V. Med ensamrätt. Specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas. Varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)



Respironics Inc.  
1001 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668 USA



Respironics Deutschland GmbH & Co. KG  
Gewerbestrasse 17  
82211 Herrsching, Tyskland



**REF** 1151726  
1151726 R00  
RWS 04/26/2021  
Swedish