

# Testirajte se na covid-19

Pročitajte čitavo uputstvo prije nego što počnete

## 1. Potrebno vam je:

- E-legitimacija (bank-ID ili Freja eID Plus)
- Kopleť za testiranje koji sadrži:  
epruvetu s čistom vodom, šalicu, štapić za uzimanje uzorka,  
vlažnu maramicu sa sredstvom za dezinficiranje, te dvije sa alkoholom za ruke

## 2. Priprema

Očistite ruke. Koristite, na primjer, dobijenu vlažnu maramicu sa alkoholom za ruke. Otvorite zatim vrećicu sa štapićem za uzimanje uzorka tako da lako pristupite dršci štapića.

## 3. Uzmite uzorak

Uzet ćete i uzorak iz ždrijela (grgljanjem) i uzorak iz nosa.

### Ždrijelo

Uradite ovako:

1. Odvrnite čep sa epruvete s vodom.
2. Hraknite tako da dobijete malo pljuvačke, a zatim sipajte vodu iz epruvete u usta, nagnite glavu malo nazad i grgljajte vodu u stražnjem dijelu grla oko 3 sekunde.
3. Pažljivo ispljunite vodu u šalicu.
4. Pažljivo prelijte vodu iz šalice u epruvetu.
5. Držite ili stavite negdje epruvetu tako da bude stabilna dok uzimate uzorak iz nosa.

### Nos

Uzmite uzorak što dalje iz nosa uz pomoć gornjeg dijela štapića za uzimanje uzorka.

Uradite ovako:

6. Umetnite štapić za uzimanje uzorka u jednu nozdrvu što dalje u nosu i provrtite ga nekoliko puta.  
*Savjet! Umetnite štapić uz donji dio nosa i lagano ga pomjerajte kako biste našli tačan put kroz nozdrvu.*
7. Izvadite štapić iz nosa, stavite ga u epruvetu i promiješajte ga u vodi oko 3 sekunde.
8. Izvadite štapić i zavrните čep na epruvetu.
9. Koristite vlažnu maramicu sa sredstvom za dezinficiranje kako biste temeljito obrisali epruvetu.
10. Provjerite da li je čep dobro zavrnut.
11. Očistite ruke. Koristite, na primjer, dobijenu vlažnu maramicu sa alkoholom za ruke.
12. Gotovo!

## 4. Bacite otpad

Šalicu, štapić i drugi potrošni materijal vratite u vrećicu i bacite.

## 5. Registrirajte test na 1177.se

Imajte na umu da su informacije na 1177.se nakon prijave samo na švedskom jeziku.

Test mora biti registriran na osobu koja je testirana. **Važno je da završite** registriranje testa. Zeleni prozorčić sa informacijama "Testkit registrerat!" („Komplet za testiranje je registriran!") znači da ste gotovi. Ako ne završite registraciju, nećete dobiti odgovor na test.

Registrirajte **vlastiti** test

- Kamerom na mobilnom telefonu ili pomoću QR-čitača (aplikacije) skanirajte QR-kod u isprekidanom okviru koji se nalazi na listu sa instrukcijama isporučenom u kompletu za testiranje.
- Prijavite se i uradite registriranje testa.

ili

- Otvorite web preglednik i navedite adresu <https://pep.1177.se/testkit>
- Prijavite se i uradite registriranje testa.
- Registrirajte vaš test uz pomoć broja kompleta za testiranje ("testkitsnummer") koji se nalazi u isprekidanom okviru na listu sa instrukcijama isporučenom u kompletu za testiranje.

Registrirajte test **djeteta**

Za djecu do 13 godina starosti, potrebno je da vi kao staratelj **registrirate broj kompleta za testiranje kao zastupnik na 1177.se**. Ne možete biti zastupnik djece starije od 13 godina, ona moraju imati vlastitu e-legitimaciju.

- Otvorite web preglednik i navedite adresu <https://e-tjanster.1177.se>
- Prijavite se u svoje ime.
- Izaberite svoje dijete pod "Agera ombud" („Budite zastupnik“) na početnoj stranici.
- Izaberite "Egen provhantering" („Vlastito rukovanje testom“)
- Registrirajte test uz pomoć broja kompleta za testiranje ("testkitsnummer") koji se nalazi u isprekidanom okviru na listu sa instrukcijama isporučenom u kompletu za testiranje.

**Pažnja!** Ne možete koristiti QR-kod za registriranje testa za dijete.

## 6. Predajte test na analizu

Nakon što ste uradili test i registrirali ga na 1177.se, ostavite epruvetu sa uzorkom u neku od naših kutija. Postoji poseban pretinac za predavanje epruveta sa uzorcima. Ostavite epruvetu sa uzorcima što je prije moguće nakon što ste uradili test.

## 7. Odgovor na test


Ako ste odobrili slanje obavještenja sa 1177.se, dobit ćete obavijest putem sms poruke ili e-maila kad stigne odgovor na test. Da biste vidjeli odgovor na test, prijevite se na 1177.se i izaberite *Beställ provtagning och se svar* („Naručite testiranje i pogledajte odgovor“) pod *Egen provhantering* („Vlastito rukovanje testom“).

## Uzorak iz ždrijela

(Instrukcije  
1-5 na str. 1)



Grgljajte.

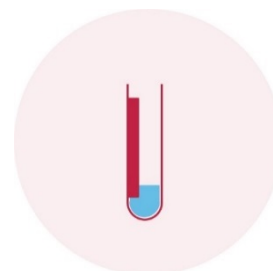


Uzorak iz ždrijela stavite  
u epruvetu.

## Uzorak iz nosa

(Instrukcije  
6-12 na str. 1)




Štapić za uzimanje  
uzoraka u nosu.

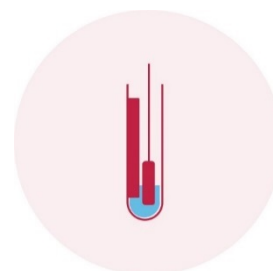



Uzorci iz ždrijela i nosa se  
promiješaju.

## Registrirajte test na 1177.se

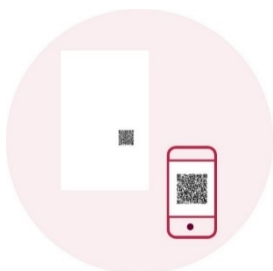

Skanirajte QR-kod pomoću  
mobilnog telefona/QR-čitača,  
prijavite se i registrirajte test.

Važno je da  
završite  
registraciju!

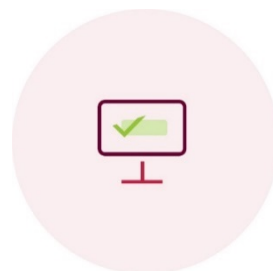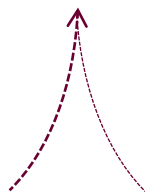


Ili se prijavite i registrirajte  
test putem web preglednika.

## Ostavite test



Epruveta se ostavlja...

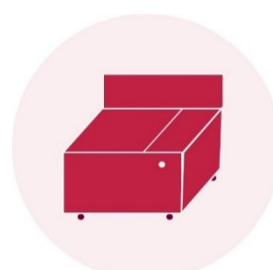

... u kutiju.