


الفحص الذاتي لمرض كوفيد – 19

يرجى أن تقرأ الإرشادات بكاملها
وبدقة قبل أن تبدأ أخذ عينة الفحص.

من المهم أن يتم تنفيذ جميع المراحل لكي تتمكن من
الحصول على إجابة لفحصك.


لكي تتمكن من تسجيل فحصك فإن الأمر يتطلب
هوية إلكترونية.

محتويات الكيس

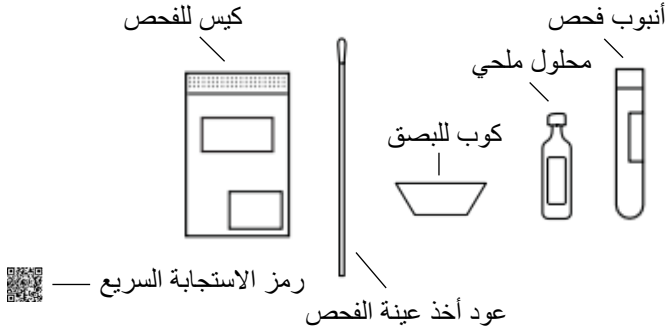

التحضير قبل أخذ عينة الفحص

1. أخرج أنبوب الفحص والزجاجة التي تحتوي على السائل الملحي.
2. افتح زجاجة السائل الملحي عن طريق لف السدادة.
3. قَرِّغ السائل الملحي في أنبوب الفحص. استمر في مسك أنبوب الفحص أو ضعه بحيث يقف بصورة ثابتة.

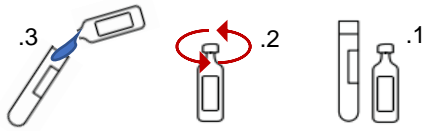

1177
VÄRDGUIDEN

Region
Värmland

البلعوم 1

20 ثانية



1. خذ عود أخذ العينة وأدخله على امتداد الجهة الداخلية من الخد باتجاه الحلق وأدخله إلى أبعد حد ممكن.
2. حك باستخدام العود القطني حوالي 20 ثانية على الجهتين وإلى أبعد حد ممكن الوصول إليه في الحلق.
3. أخرج عود أخذ العينة من الحلق.


الأنف – أخذ عينة الفحص 2

20 ثانية



1. أدخل الآن العود القطني على امتداد جدار الأنف 2 – 3 سنتيمتر. حك لمدة 20 ثانية تقريباً. افعل الشيء نفسه في فتحتي الأنف.
2. أخرج العود القطني من الأنف ثم أبقه في يدك.

اللعاب – أخذ عينة الفحص 3

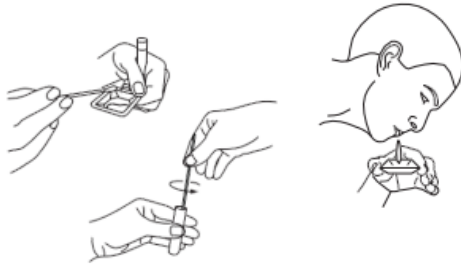

20 ثانية

1. أخرج كوب البصق وابصق بضعة مرات بحيث تغطي أرضية القاع بصورة تامة.
2. خذ عود أخذ عينة الفحص وحركها بعد ذلك في اللعاب لمدة 20 ثانية.
3. أدخل عود أخذ عينة الفحص مع العود القطني في أنبوب الفحص وحرك بعد ذلك لمدة 20 ثانية.
4. أخرج عود أخذ عينة الفحص من أنبوب الفحص ولف السدادة بصورة محكمة.
5. تأكد جيداً من أن السائل لا يزال باقياً في أنبوب الفحص وأن السدادة محكمة الإغلاق بصورة جيدة.
6. أدخل أنبوب الفحص في كيس عينة الفحص البينفسجي واحكم إغلاقه.


أقذف الفضلات

أعد كوب البصق ووالعود والمواد الاستهلاكية الأخرى في الكيس الأكبر ومن ثم اقفها جميعاً في مكان تجميع الفضلات المنزلية.

سجّل عينة الفحص الخاصة بك - سجل الدخول في 1177.se

لكي يتمكن المختبر الذي يحلل عينة الفحص الخاصة بك من هو مصدر العينة فيجب أن تربط الفحص برقمك الشخصي. لذلك يجب أن تتمكن من التعريف بهويتك باستخدام الهوية الالكترونية عندما تسجل الفحص.

1. ستعثر على رمز الاستجابة السريعة QR-kod هناك.

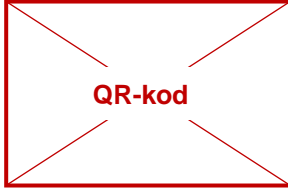

2. اعمل مسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة باستخدام كاميرا هاتفك الجوال أو تطبيق رمز الاستجابة السريعة. واتبع الرابط الذي يظهر وسجل الدخول. إذا لم تتمكن من قراءة رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك الجوال فبإمكانك أن تفتح متصفح الويب وتدون العنوان التالي: <http://pep.1177.se/testkit> سجل الدخول وسجل الرقم الموجود تحت رمز الاستجابة السريعة.

3. املاً البيانات المطلوبة.

4. اضغط على زر انهاء الطلب Slutför beställningen

قم بتسليم فحصك للتحليل

بعد أن تقوم بعمل جميع الخطوات أعلاه قم بتسليم فحصك حسب الإرشادات التي حصلت عليها عندما استلمت كيس الفحص الخاص بك. قم بتسليم فحصك في أسرع وقت ممكن بعد القيام بعمل الفحص. احتفظ بهذه الارشادات مع رمز الاستجابة السريعة الخاص بك حتى تحصل على نتيجة الفحص الخاص بك.

نتيجة الفحص

ستحصل على نتيجة فحصك خلال يومين عن طريق الخدمات الالكترونية في الموقع 1177.se

سجل الدخول في 1177.e واكبس على حجز أخذ عينة الفحص وأنظر الإجابة "Beställ provtagning och se svar" تحت العنوان التعامل بعينة الفحص الذاتي Egen provhantering.

إذا وافقت على تلقي الإشعارات من 1177.se فسيصلك إشعار عن طريق رسالة هاتفية قصيرة اس ام اس sms أو بالبريد الالكتروني عند وصول نتيجة الفحص.

إذا لم تحصل على إجابة عن عينة الفحص خلال 3 أيام عليك أن ترسل إشعار عن طريق البريد الالكتروني عن ذلك

egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se

أذكر باختصار بماذا تتعلق القضية ورقم الهاتف لكي تتمكن من التواصل معك عليه. لا ترسل ابدأ رقمك الشخصي عن طريق البريد الالكتروني.