

Tee covid-19-testi

Lue näytteenotto-ohjeet läpi huolellisesti ennen kuin aloitat näytteen ottamisen.

Voit suorittaa tämän näytteenoton vain, jos sinulla on sähköinen henkilötodistus

Soita numeroon 021-17 30 00


painikevalinta 1 ellei sinulla ole sähköistä henkilötodistusta ja sinun tarvitsee sen sijaan tehdä omanäytteenottovaraus.

Valmistelut ennen näytteen ottamista


Tarvitset:

- Sähköisen henkilötodistuksen
- Näytteenottopakkauksen, jossa on: koeputki, pieni pullo suolaliuosta, sylkikuppi ja näytteenottopuikko.

Pakkauksen sisältö

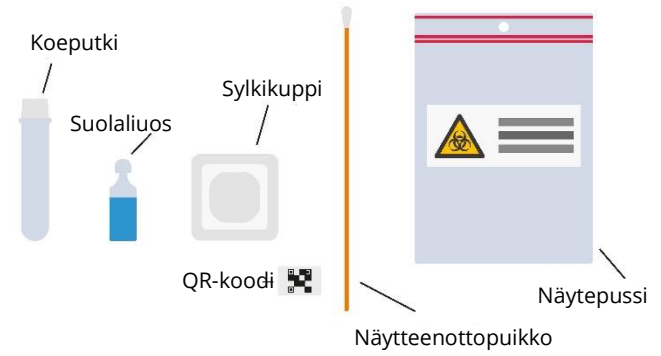


- 1 Avaa pakkaus ja ota esille koeputki ja suolaliuospullo.
- 2 Avaa suolaliuospullo katkaisemalla sen pää kiertämällä.
- 3 Tyhjennä suolaliuos koeputkeen. Pidä koeputkea kädessä tai aseta se seisomaan tukevasti.
- 4 Ota nyt kolme näytettä alla olevien ohjeiden mukaan.

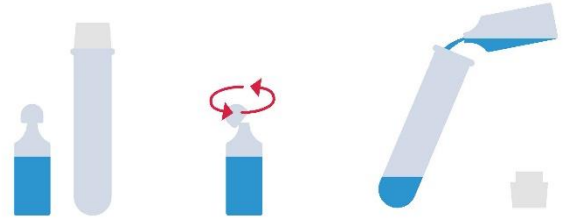

Ota näytteet seuraavalla tavalla


Nielu – näyte 1

- 1 Vie näytteenottopuikko posken sisäseinää mahdollisimman syvälle kohti nielua. Varo koskettamasta puikolla kieltä, hampaita tai ikeniä.
- 2 Hierrä näytteenottopuikkoa kummallakin puolella syvällä kurkussa noin 20 sekunnin ajan
- 3 Vedä näytteenottopuikko ulos.

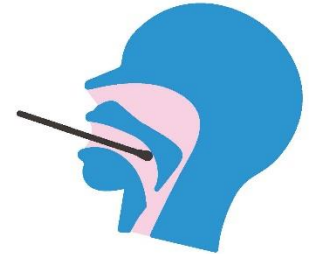

Nenä – näyte 2


- 1 Vie sama puikko nyt sieraimen. Hierrä noin 2-3 cm syvyydellä sieraimen seinää vasten 20 sekunnin ajan. Tee sama toisessa sieraimessa.
- 2 Vedä näytteenottopuikko ulos nenästä ja pidä sitä kädessäsi.

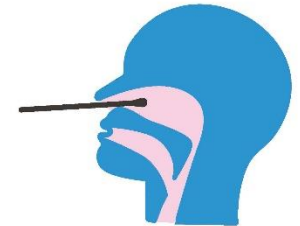

Sylki – näyte 3

- 1 Ota esille sylkikuppi ja sylje siihen muutamia kertoja niin, että sen pohja peittyy kunnolla.
- 2 Ota jo käyttämäsi näytteenottopuikko ja pyöritä sitä syljessä 20 sekuntia.
- 3 Vie näytteenottopuikko sitten koeputkeen ja pyöritä sitä siellä noin 20 sekuntia.
- 4 Ota näytteenottopuikko ulos koeputkesta ja kierrä korkki kiinni huolellisesti.
- 5 Tarkista vielä kerran, että neste on jäljellä koeputkessa ja että koeputken korkki on suljettu kunnolla.
- 6 Laita koeputki pieneen näytepussiin ja sulje se. Tämä sinun tulee jättää analysoitavaksi.

Käännä

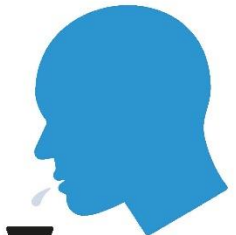

Heitä jätteet roskeen


Pane sylkikuppi, puikko ja muu käytetty materiaali pakkauksen muovipussiin ja heitä se tavallisiin talousjätteisiin (poltettavat/jäännösjätteet).

Rekisteröi näytteesi – kirjaudu sivulle 1177

Huomaa, että et voi käyttää QR-koodia alle 13-vuotiaan lapsen testipakkausnumeron rekisteröintiin. Katso alla, kuinka rekisteröit alle 13-vuotiaan lapsen testipakkausnumeron. Voit suorittaa tämän näytteenoton ainoastaan, jos sinulla on sähköinen henkilötodistus. Soita numeroon 021-17 30 00 painikevalinta 1 ellei sinulla ole sähköistä henkilötodistusta ja tarvitsee sen sijaan varata omanäytteenotto.

Menettele seuraavasti, jos olet 13-vuotias tai vanhempi

- 1 Skannaa QR-koodi matkapuhelimen kameralla tai QR-sovelluksella, seuraa näkyviin tulevaa linkkiä ja kirjaudu sähköisellä henkilötodistuksella. (13-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset käyttävät omaa sähköistä henkilötodistustaan)
- 2 Noudata matkapuhelimeen tulevia ohjeita testipakkausnumeron rekisteröintiin. Numero, joka sinun tarvitsee täyttää, löytyy etiketistä. Ellet pysty lukemaan QR-koodia matkapuhelimellasi, voit avata selaimen ja kirjoittaa osoitteeksi: <http://pep.1177.se/testkit>

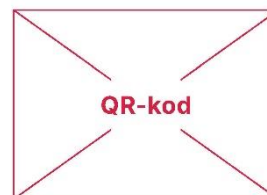

Tee näin, jos olet alle 13-vuotiaan lapsen huoltaja

5–13-vuotiaan lapsen huoltajan tulee rekisteröidä lapsen testipakkausnumeron **asiamiestilassa**.

- 1 Avaa verkkoselain ja kirjoita osoite <http://pep.1177.se/testkit>
- 2 Kirjaudu sisään omalla sähköisellä henkilötodistuksellasi
- 3 Valitse lapsesi (asiamiestilassa)
- 4 Valitse Oma näytteenkäsittely
- 5 Rekisteröi etiketissä oleva näytteenottopakkausnumeron.

Toimita näytteesi analysoitavaksi

Suorittuasi jokaisen yllä mainitun vaiheen jätät näytteesi analysoitavaksi niiden tietojen mukaan, jotka sinulle annettiin saadessasi näytteenottopakkausnumeron. Toimita näytteesi analysoitavaksi mahdollisimman pian sen ottamisen jälkeen. Verkkosivulta 1177.se/Vastmanland/sjalvprovtagning-vastmanland löydät ohjeet siitä, minne voit jättää näytteen.

Säilytä nämä ohjeet ja QR-koodisi, kunnes olet saanut näytevastauksesi.

Näytevastaukset

Normaalisti saat näytevastauksesi 48 tunnin kuluessa, mutta siihen voi kulua jopa 4 vuorokautta. Kirjaudu sivulle 1177.se, jolta näet näytevastauksesi, klikkaa otsikon Omanäytteen käsittely alta linkkiä Tilaa näytteenotto ja katso vastaus.

Jos olet hyväksynyt ilmoituksen lähettämisen sivulta 1177.se saat ilmoituksen tekstiviestinä tai sähköpostitse näytevastauksen tultua.

Tuki

Rekisteröintiä koskeissa teknisissä kysymyksissä mene osoitteeseen <https://1177.support.se/oversikt/flow/38>

Kirjautumista sivulle **1177.se**, koskeissa kysymyksissä soita Yhteyskeskukseen 021-17 30 00, painikevalinta 1. Aukioloajat ovat arkisin klo 9–17.